


## QSG 7701 细胞说明书（C01-FP）

### 基本信息

|      |                     |
|------|---------------------|
| 编号   | C01-FP              |
| 名称   | QSG 7701            |
| 种属   | 人正常肝细胞              |
| 生长特性 | 贴壁                  |
| 形态   | 上皮                  |
| 培养基  | RPMI-1640+10%FBS    |
| 生长条件 | 95%空气+5%二氧化碳 37 摄氏度 |
| 冻存条件 | 90%FBS + 10%DMSO    |


### 细胞图片

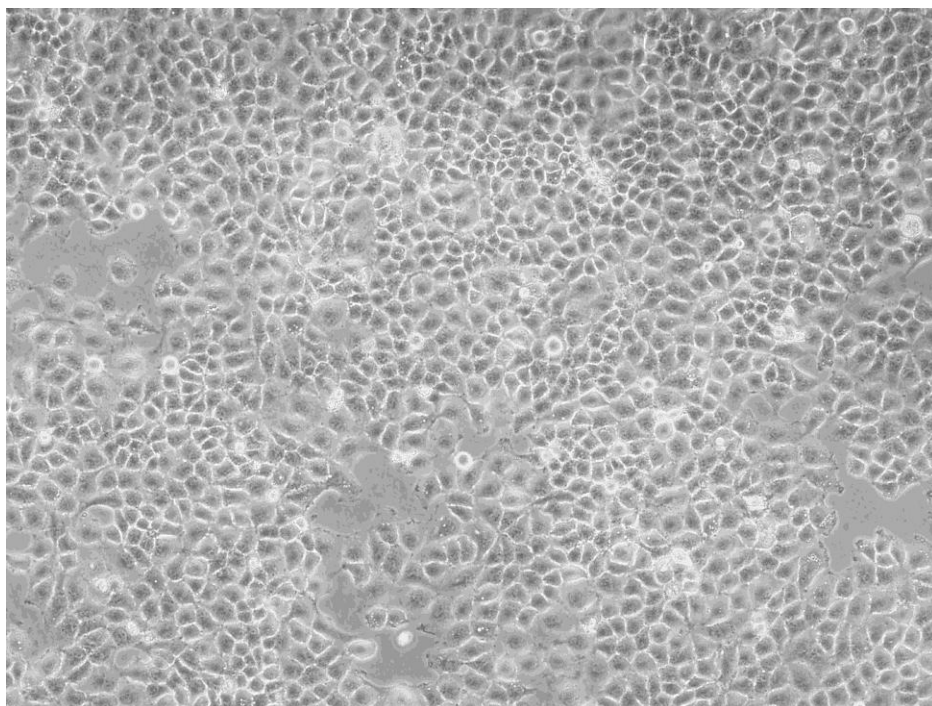

## 支原体检测结果

阴性 (Lonza Mycoalert mycoplasma detection kit)

## STR 鉴定结果

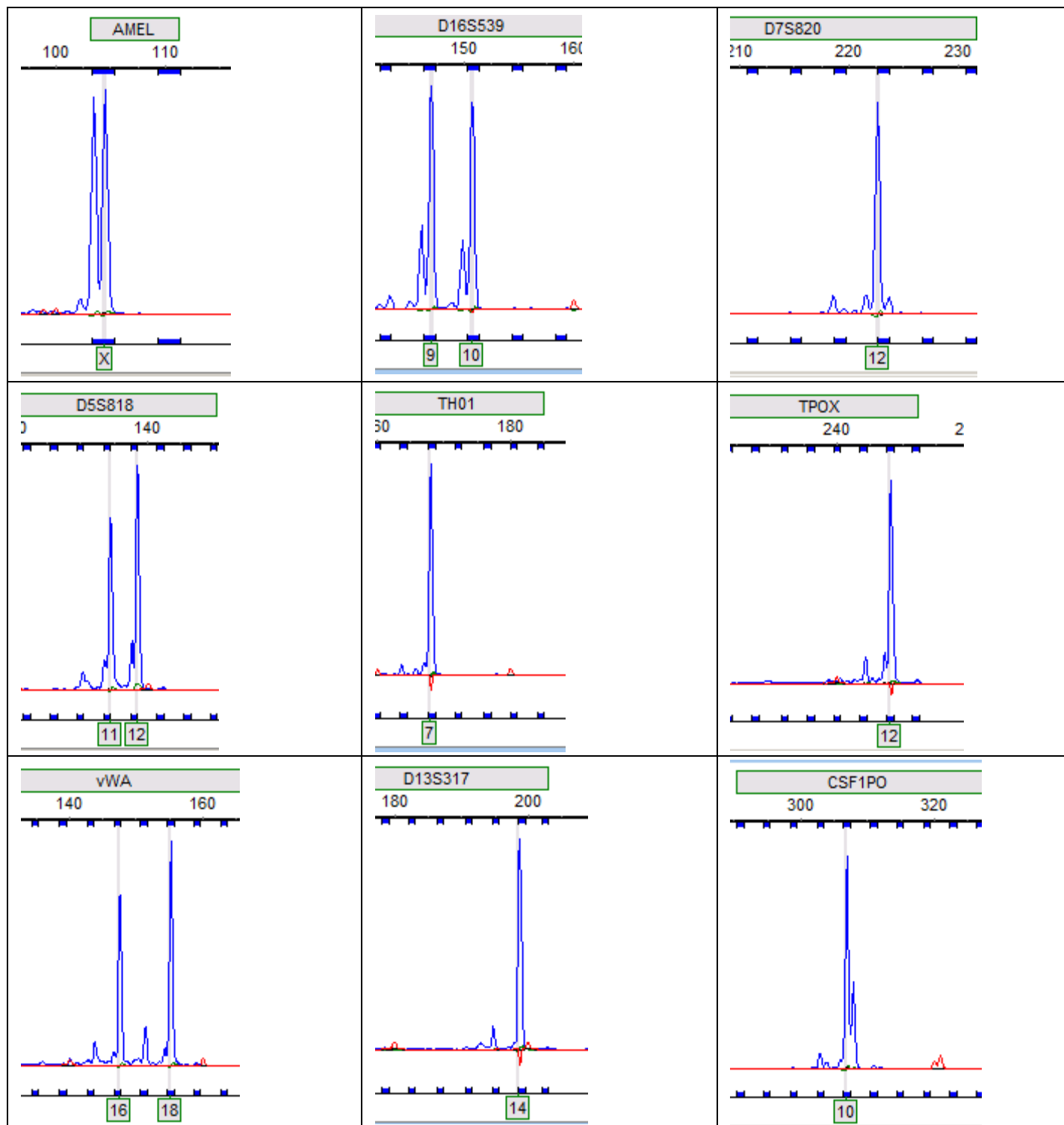

实测 (100% match)

| Ameloge | D16S539 | D7S820 | D5S818 | TH01 | TPOX  | vWA   | D13S317 | CSF1PO |
|---------|---------|--------|--------|------|-------|-------|---------|--------|
| x       | 9,10    | 12,12  | 11,12  | 7,7  | 12,12 | 16,18 | 14,14   | 10,10  |

标准信息 (<http://www.cellresource.cn/fdetail.aspx?id=466>)

STR Amelogenin:X; CSF1PO:10; D13S317:13,3; D16S539:9,10; D18S51:16; D19S433:13; D21S11:27,28; D2S1338:17; D3S1358:15,18; D5S818:11,12; D7S820:12; D8S1179:12; FGA:18,21; TH01:7; TPOX:12; vWA:16,18

#### 附 1：细胞接收后的操作流程与注意事项

1. 您收到细胞时，若干冰已经完全融化，请立即将细胞复苏培养，切勿再次低温冻存；若尚留有干冰，请立即将含有细胞的冻存管放入液氮中保存待用，并按指定条件贮存细胞，切不可将细胞置于高温环境。
2. 请您在接收细胞后的 4 周内及时做复苏培养，以确认细胞活力、状态并保种。逾期恕不受理售后问题，谢谢合作！

#### 附 2：贴壁细胞常规培养传代流程（请严格遵守无菌操作）

1. 吸出原培养瓶中的培养基，PBS 缓冲液润洗细胞两次，加 1~2 ml 含 0.05% EDTA 的胰酶进行消化（37 度细胞培养箱注意把握消化时间，通常控制在 1~2min）。
2. 镜下观察消化情况，在细胞边缘缩小变圆变亮时轻轻拍打瓶身，加 3~5ml 完全培养基终止消化，轻轻吹打细胞悬液，尽量把细胞全部吹落、吹散。
3. 取全部细胞悬液放入离心机离心 1500 转 5min，离心后去上清，完全培养基重悬后转移到新的培养皿/瓶中，添加适当的完全培养基，于培养箱中培养。
4. 注意培养基 PH 值变化情况，定期换液，待细胞密度达到 80-90%以后重复传代操作或者冻存。

#### 附 3：悬浮细胞常规培养传代流程（请严格遵守无菌操作）

1. 悬浮细胞常规传代操作为半量换液，分瓶传代，即取出一半细胞悬液转移到新的培养皿/瓶中，添加适当的完全培养基，于培养箱中培养；也可根据细胞密度分多瓶传代。
2. 注意培养基 PH 值变化情况，定期换液，待细胞密度达到 70-80%时重复传代操作或者冻存。

#### 附 4：半贴壁半悬浮细胞培养注意事项（请严格遵守无菌操作）

1. 若悬浮细胞较多且折光率良好，可离心收集，继续培养。
2. 若有少量细胞悬浮，也可不用收集，传代操作按常规贴壁细胞操作流程处理。
3. 若悬浮细胞较多，离心收集，原瓶中贴壁细胞按照常规贴壁细胞操作流程进行消化、终止消化、吹打，并与之前收集的悬浮细胞混悬，分瓶培养。